

**FICHA TÉCNICA - CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS DX2**

Cód.: 06250




REGISTROS	
NCM	9402.9020
ANVISA	80795950048
GTIN	7898952570596
Nº Certificado INMETRO	Não Aplicável


**DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO**

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura

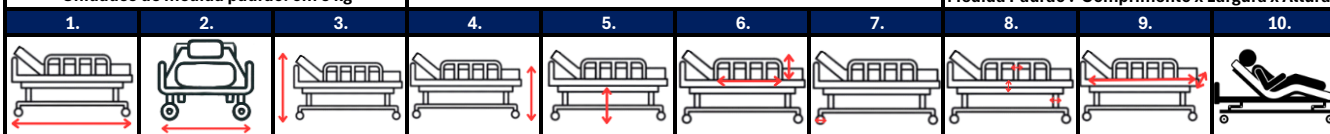

Comprimento da Cama	Figura 01	200 cm
Largura da Cama	Figura 02	96 cm
Altura da Cabeceira até o chão	Figura 03	95 cm
Altura da Peseira até o chão	Figura 04	85 cm
Altura do Leito até o Chão	Figura 05	64,5 cm
Comprimento x Altura da Grade Lateral	Figura 06	100 x 34 cm
Diâmetro do Rodízio	Figura 07	12,5 cm   5 polegadas
Diâmetro dos Tubos	Figura 08	3,2 / 2,5 / 1,6 cm
Largura x comprim. do leito (parte interna)	Figura 09	80 x 190 cm
Capacidade de peso	Figura 10	180 kg

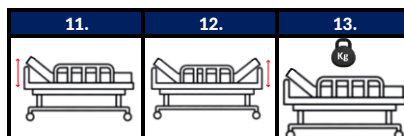


Angulação Max. Cabeceira	Figura 11	80°
Angulação Max. Peseira	Figura 12	65°
Peso líquido da Cama	Figura 13	39,5 kg

**DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO**

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão : Comprimento x Largura x Altura

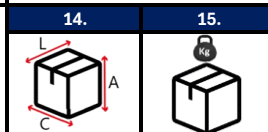

Dimensões Caixa Unitária	Figura 14	202 x 95,5 x 12,5cm
Peso Bruto da Caixa Unitária	Figura 15	43,20 kg

**GARANTIA**

12 meses

**FUNCIONALIDADES**

Rodízios:	4 rodízios com freio	Estrutura:	Aço carbono, pintura epóxi
Grade Lateral:	Rebatível em aço carbono	Cabeceira e Peseira:	Possuem ajuste de elevação manual

### INFORMAÇÕES GERAIS

<b>CORES</b>	Estrutura branco e acabamentos azul
<b>CABECEIRA E PESEIRA</b>	Fixas
<b>COMPOSIÇÃO DE ITENS</b>	Estrutura de aço carbono com pintura epóxi, 4 rodízios e 2 capas de manivela em polipropileno.

### DIFERENCIAIS

A cama hospitalar foi desenvolvida para proporcionar conforto e praticidade aos pacientes e cuidadores. Fabricada com estrutura em tubo de aço 1020, oferece alta resistência e durabilidade. Sua pintura epóxi assegura proteção contra corrosão, aumentando a durabilidade e prolongando a vida útil do produto.

A cabeceira e a peseira são fixas, garantindo estabilidade. A angulação máxima da cabeceira é de 80°, enquanto a peseira pode ser ajustada até um ângulo máximo de 65°, permitindo maior flexibilidade e conforto para o paciente. Além disso, está equipada com rodízios de 12,5 cm com freios de ação dupla, que garantem maior mobilidade em curtas distâncias e facilitando o cuidado com o paciente.

**DETALHAMENTO CODIGOS DE PEÇAS**

				
05869 – CABECEIRA CAMA DX2	06205 – ESTRUTURA LEITO CAMA DX2	05871 – GRADE LATERAL CAMA DX2	06175 – KIT MONTAGEM CAMA DX2	05870 – PESEIRA CAMA DX2
				
0001000490 – RODIZIO COM FREIO DX2 DX3	06619 – SUPORTE DA GRADE LATERAL CAMA DX2	06600 – MANIVELA LONGA CABECEIRA CAMA DX2 V	06601 – MANIVELA CURTA PESEIRA CAMA DX2 V	

**VERSÕES FORA DE LINHA**

Faturar até zerar o estoque, não haverá recompra.

				
06206 – RODIZIO COM FREIO DX2 DX3				