

FICHA TÉCNICA - GUINCHO PARA ELEVAÇÃO MANUAL D5000

Cód.: 05718




REGISTROS	
NCM	8713.10.00
ANVISA	80795959003
GTIN	7898952570343
Nº Certificado INMETRO	MED 2451-24-01

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura

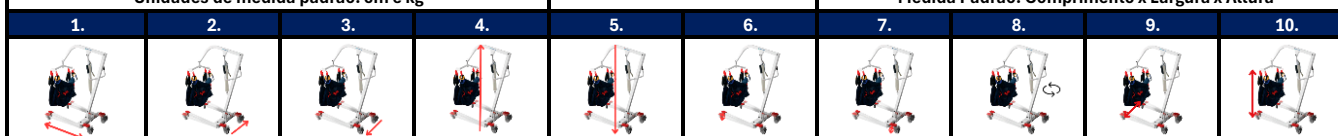

Comprimento do Guincho	Figura 1	115 cm
Largura Máxima do Guincho	Figura 2	120 cm
Largura Mínima do Guincho	Figura 3	60 cm
Altura Máxima do Guincho	Figura 4	212 cm
Altura Mínima do Guincho	Figura 5	143 cm
Medida do chão até o acabamento vermelho do Rodízio Dianteiro	Figura 6	12 cm
Medida do chão até o acabamento vermelho do Rodízio Traseiro	Figura 7	14,5 cm
Diâmetro Mínimo de Giro com os Garfos Abertos	Figura 8	150 cm
Varição Máxima da Abertura da Base	Figura 9	63,4 cm
Extensão de elevação ajustável (gancho)	Figura 10	98 – 195 cm




Largura do Cesto M	Figura 11	89 cm
Altura do Cesto M	Figura 12	99 cm
Peso Líquido do Guincho	Figura 13	41 kg
Capacidade de Peso	Figura 14	180 kg

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM DO PRODUTO

Unidades de medida padrão: cm e kg

Medida Padrão: Comprimento x Largura x Altura

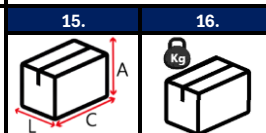

Dimensões Caixa Unitária	Figura 15	132x67x31,5cm
Peso Bruto da Caixa Unitária	Figura 16	46,5 kg

GARANTIA

12 MESES ESTRUTURA:	Peças em aço
6 MESES COMPONENTES:	Cesto, pistão hidráulico, manoplas e peças plásticas

FUNCIONALIDADES

Freios:	Rodízios traseiros
Cesto:	Reforçado de nylon tamanho médio - Disponível nos tamanhos P, M e G
Tamanho P	42 x 83 x 80 cm
Tamanho G	52 x 92 x 90 cm
Regulagem:	4 alças regulagem. Vermelho o nível 1, amarelo o nível 2, azul o nível 3 e o preto o nível 4
Altura do chão até a Base:	Altura do chão até o acabamento vermelho na parte dianteira é de 12cm e do chão até o acabamento vermelho na parte traseira é de 14,6cm
























INFORMAÇÕES GERAIS

COMPOSIÇÃO DE ITENS:	Estrutura principal, pistão e estrutura do rodizio em aço carbono e com pintura epóxi, cantoneiras em EVA e cesto em nylon
COR:	Branco

DIFERENCIAIS

O Guincho D5000 oferece diversos diferenciais que garantem praticidade e conforto no seu uso. Ele possui manoplas que facilitam a movimentação da estrutura, tornando o processo de posicionamento mais eficiente. Seu mecanismo de acionamento é ambidestro, o que proporciona versatilidade e facilita o manuseio por diferentes usuários. O cesto é equipado com três alças, o que contribui para tornar o movimento do paciente mais suave e seguro. Além disso, o guincho pode ser utilizado durante o banho, e o cesto é lavável e de rápida secagem, oferecendo maior praticidade e higiene. Por fim, o guincho realiza um giro de 360°, permitindo um ajuste de posição preciso e flexível.

DETALHAMENTO CÓDIGOS DE PEÇAS

				
06222 - ACABAMENTO DO MECANISMO ABERTO E FECHADO	06217 - ACABAMENTO VERMELHO GUINCHO D5000	06403 - ANEL DE VEDACAO PARA PISTAO GUINCHO D5000	06399 - CESTO DO GUINCHO D5000 TAM G	06223 - CESTO DO GUINCHO D5000 TAM M
				
06397 - CESTO DO GUINCHO D5000 TAM P	06215 - RODÍZIO TRASEIRO COM FREIO D5000	06402 - KIT DE MONTAGEM GUINCHO D5000	06224 - KIT DE PARAFUSOS GUINCHO D5000	06398 - KIT DE VEDACAO PARA GUINCHO D5000
				
0001000132 - PEDAL DE ABERT. E FECHAM. GUINCHO D5000	06420 - PINO DE INOX PARA BRACO GUINCHO D5000	06216 - PISTAO HIDRAULICO GUINCHO D5000	0001000140 - ESTRUTURA SUPERIOR DO GUINCHO D5000	06214 - RODÍZIO DIANTEIRO SEM FREIO D5000
				
06219 - ESTRUTURA DA BASE D5000	06213 - MANOPLA D5000	06404 - EIXO PARA PISTAO GUINCHO D5000	0001000104 - HASTE FIXA DO CILINDRO GUINCHO D5000	0001000105 - C.J. DE FIXACAO MANIVELA GUINCHO D5000
				
0001000106 - MANIVELA DO CILINDRO GUINCHO D5000	0001000141 - SUPORTE 360° DO CESTO GUINCHO D5000	06218 - ESTRUTURA DA COLUNA GUINCHO D5000		